

SUNMED

Auto Air Select

Das multifunktionale Matratzensystem!



✓ Low Air Loss System

✓ Maximaler Fülldruck

✓ Sperrbares Display

✓ Aktive Drucküberwachung (sensorgesteuert)

✓ Statische Weichlagerung oder Wechseldrucksystem



Auto Air Select

Das multifunktionale Matratzensystem!

Steuereinheit



Die leichte, leise arbeitende Steuereinheit ist bequem am Fußende des Bettes anzubringen

Die Steuereinheit befindet sich in einem leichten, schlagfesten ABS-Kunststoffgehäuse. Die benutzerfreundliche Bedienung mit integriertem Komfortregler erleichtert die Einstellung der individuellen Patientenparameter.

Die Integration einer geräusch- und vibrationsarmen Bauweise des Kompressors garantiert eine hohe Laufruhe und leisen Betrieb. Der Patient wird nicht gestört. Der Kompressor erzeugt kaum Wärme, so daß ein Aufheizen vermieden wird.

Matratzensystem



Das Material der Matratze und des Schonbezuges ist weich und hautfreundlich.


Das Matratzensystem:

Die Matratze besteht aus einem Material mit geringer Scher- und Zugkraft. 20 modular aufgebaute Luftkammern gewährleisten eine maximale Unterstützung und Druckverteilung sowie individuellen Austausch ohne Druckverlust. Die Mikroperforation der Matratze ermöglicht die Durchführung einer echten „Low-airloss-Therapie“ und vermeidet Hautmazerationen.

Der Schonbezug besteht aus einem speziellen Nylon mit extrem geringer Scher- und Zugkraft. Die Unterseite ist mit einem dampfdurchlässigen Polyurethanbezug beschichtet, der wasserabweisend und atmungsaktiv ist.

Das geringe Gewicht, die handliche Transportgröße und die kompakte Steuereinheit ermöglichen eine hohe Mobilität.

Schnellentlüftung

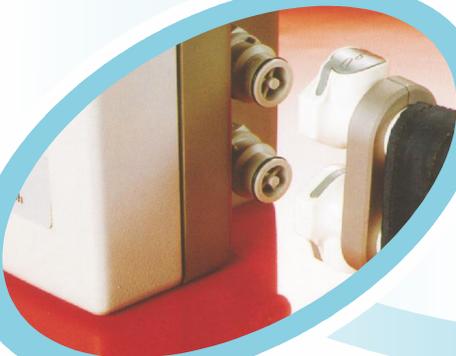

Die Schnellentlüftung entleert die Matratze in weniger als 30 Sekunden bei CPR oder anderen Notfällen.

Maximaldruck auf Knopfdruck:

Die integrierte „MAX“-Füllungseinheit der Auto Air Select - Steuereinheit, füllt die Matratze in weniger als 40 Sek. von 0% auf 100%, sonst nur in teureren Bettensystemen des Intensivbereiches zu finden. Vergleichbare Wechseldruck-Systeme benötigen dazu bis zu 60 Minuten.

Vom normalen therapeutischen Druck bis zur maximalen Füllung vergehen weniger als 20 Sekunden. Dadurch werden die Wartezeiten minimiert und ärztliche und pflegerische Maßnahmen können auf sicherer und stabiler Behandlungsoberfläche stattfinden.

Technische Daten:

Steuereinheit:	
Abmessungen (H x B x T)	25 cm x 30 cm x 13 cm
Gewicht	4,1 kg
Betriebsspannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Leistung	2,5 A
Betriebsart	kontinuierlich

Bestellnummer: RA-2500 VK-KIT



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Technische Änderungen vorbehalten - © Sunmed 2015 / SM-AAS-15V05



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464