

SUNMED


Auto Sure Float

Wechseldruck-System mit variablen Zyklen!



- ✓ Wechseldrucksystem mit 3 unterschiedlichen Zyklen
- ✓ Aktive Drucküberwachung (sensorgesteuert)
- ✓ Zwischen 30 und 160 kg programmierbar
- ✓ Maximaldruck innerhalb von 20 Sekunden
- ✓ Alarmüberwacht (optisch und akustisch)

Steuerung/Display

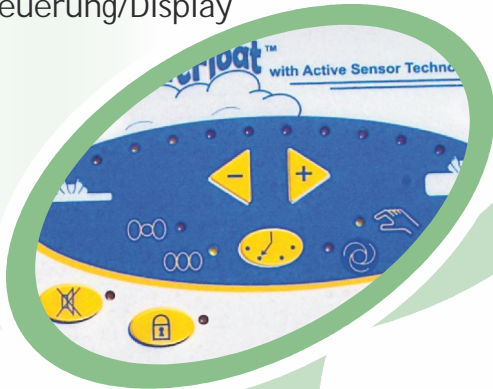

Das ergonomisch angeordnete Display mit selbst-erklärenden Piktogrammen erleichtert die individuelle Einstellung.

Steuereinheit



Die Steuereinheit befindet sich in einem leichten, schlagfesten ABS-Kunststoffgehäuse und ist bequem am Fußende des Bettes anzubringen. Der integrierte Kompressor in geräusch- und vibrationsarmer Bauweise garantiert hohe Laufruhe und leisen Betrieb.

U-Kissen



Ein optional erhältliches U-Kissen oder ein Fersen- und Fußkissen unterstützt die Behandlung von Risikopatienten.

Die Steuereinheit

Wechseldrucksystem im Zyklus

Die Steuereinheit ermöglicht die Einstellung von 3 unterschiedlichen Wechseldruckzyklen mit Intervallen von 6, 8 oder 10 Minuten.

Patientengewichtseinstellung

Das System ist in 10 Stufen von 30 kg bis 160 kg Patientengewicht programmierbar.

Konstanter Druck im Float Modus

Durch Einstellung des FLOAT MODUS wird der Matratzendruck entsprechend der gewählten Gewichtseinstellung auf konstantem Niveau gehalten und bei Änderung der Position des Patienten oder des Bettes kontinuierlich angepasst und überwacht.

Maximaler Druck im Maxmodus

Der integrierte „MAX-INFLATE“ MODUS der SURE-FLOAT Steuereinheit füllt die Matratze vom normalen therapeutischen Druck in weniger als 20 Sekunden auf maximalen Druck. Dies erleichtert ärztliche und pflegerische Maßnahmen.

Die Schnellentlüftung

Die Matratze ist in weniger als 30 Sekunden entleert, z. B. bei CPR oder in anderen Notfällen.

Akustischer/Optischer Alarm

Falls eine außergewöhnliche Situation auftritt, ertönt ein Alarmsignal. Ist das nicht erwünscht, um z. B. den Patienten nicht zu stören, kann durch Knopfdruck der Signalton abgeschaltet werden, und nur das Alarmsymbol leuchtet auf.

Das Matratzensystem

20 modular aufgebaute Luftkammern gewährleisten eine maximale Unterstützung und Druckverteilung.

Die Matratze und der Schonbezug bestehen aus einem Material mit geringer Scher- und Zugkraft.

Der Schonbezug ist aus einem speziellen Nylon gefertigt; die Unterseite ist mit einem wasserabweisenden, dampfdurchlässigen und atmungsaktiven Polyurethanbezug beschichtet.

Die leichte und kompakte SUREFLOAT Matratze mit integrierten Transportgriffen wird zur eigenen Tragetasche.

Bei Stromunterbrechung oder gelöstem Kabelanschluss bleibt der Matratzenfülldruck noch für mindestens 8 Stunden erhalten.

Nach Wiederherstellung der Stromversorgung kehrt das Gerät nach kurzem Selbsttest zu den vorher bestandenen Einstellungen zurück.

Technische Daten:

Steuereinheit:

Abmessungen (H x B x T)	24 cm x 13 cm x 10 cm
Gewicht	1,6 kg
Betriebsspannung	220-240 V
Frequenz, Leistung	50 Hz / 0,25 A
Betriebsart	kontinuierlich

