

EOLE DC

Konstant niedriger Druck



Technische Daten Pumpe

Stromversorgung:	AC 230 V 50 Hz, 0,07 A (für 230 V)
Sicherung:	TIAL, 250 V
Gesamtlänge:	29,5 cm
Gesamtbreite:	14,5 cm
Gesamthöhe:	19,2 cm
Gewicht:	2,4 kg
Zyklusdauer	12 min.

Klassifizierung

Klasse IIa, Typ BF, Ip24
Anwendungsteil: Luftmatratze
Nicht geeignet zur Verwendung in Räumen mit entflammaren Narkosemittelmischungen (kein AP- oder APG-Schutz)

Technische Daten EOLE DC

Modellnummer:	Serie 2871
Flammschutznormen:	EN 597-1 und EN 592-2
Sichere Arbeitsgewicht:	200 kg
Gesamtlänge:	200 cm
Gesamtbreite:	80 cm / 90 cm
Gesamthöhe:	20 cm
Gewicht:	5,45 kg

Garantie
2 Jahre Garantie

Bezeichnung
EOLE DC

Bestellnummer
2871000001

SUNMED



stryker

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464

Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Technische Änderungen vorbehalten - © Sunmed 2017 / SM-EODC-18V01

SUNMED

EOLE DC

Konstant niedriger Auflagedruck



Mit Sensoren
Kein Mindestgewicht
Wechseldrucktechnologie
Innenhöchstdruck von 32 mmHg

EOLE DC

- Konstant niedriger Druck
- Aktive Auflage zur optimalen Lagerung
- Wechseldrucktechnologie
- Tiefe Luftkammern



Tiefe Luftkammern
20 Kammern von je 20 cm mit modularem Design. Alle Kammern sind voneinander unabhängig und einzeln austauschbar.




Spezielles Fersenende
Das spezielle Fersenende lagert die empfindlichen Fersen besonders weich.



Transportmodus
Patient bleibt auch beim Transport luftgelagert.

Modulares Design
Einzelne, unabhängige, austauschbare Luftkammern.

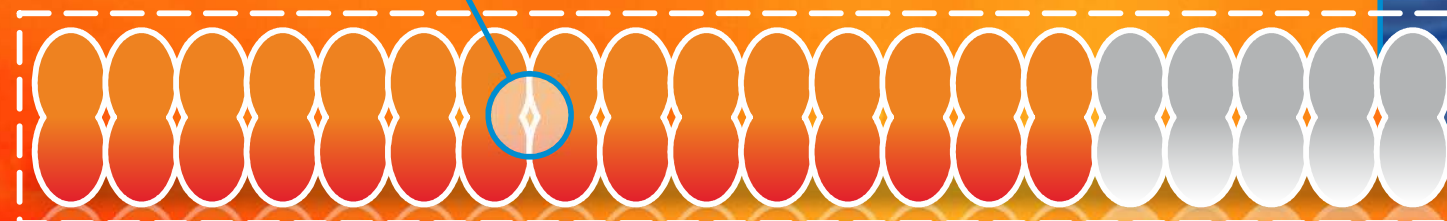

Mit Sensoren

Das System reagiert und passt sich automatisch an Bewegungen und die Position des Patienten an. Pumpenfunktionen: Wechseldruck-/Statische Weichlagerung, Komfortmodus und maximaler Druck, Druckausgleich in Sitzposition.

Bezug

In 4 Richtungen dehnbar (zur Optimierung des Einsinkens und zur Reduzierung von Scherkräften und Reibungen) sowie atmungsaktiv (luftdurchlässig und flüssigkeitsdicht).

