

# SUNMED

## NoDec S

*3 Therapien - ein System - ein Preis!*



✓ Dekubitustherapie aller Stadien

✓ 3-Kammer Wechseldrucksystem

✓ Permanente Fersenfreilagerung

✓ Zur Bauchlagerung geeignet

✓ Stromunabhängiger Transportmodus

# SUNMED NoDec S

3 Therapien - ein System - ein Preis!

## Vorteile für Patienten:

- ✓ alarmüberwachte Druckeinstellung
- ✓ drei Therapieformen: Wechseldruck, Weichlagerung, Bauchlagerung
- ✓ drei Komfortstufen: fest, medium, weich in den Betriebsarten dynamisch und statisch
- ✓ Weichlagerung beim Patiententransport durch Rückschlagventile gewährleistet

## Indikationen:

- ✓ Dekubitusprophylaxe für Hochrisikopatienten
- ✓ Dekubitustherapie von Stadium 1 - 4 nach Seiler
- ✓ Verbrennungen
- ✓ Schmerztherapie
- ✓ therapeutische Bauchlagerung
- ✓ Patientengewicht bis max. 250kg

## Vorteile für das Personal:

- ✓ das gut lesbare Display zeigt jederzeit den Status der Matratze und der Steuerung an
- ✓ flexible Aufhängungsmöglichkeiten (an oder unter dem Bett)
- ✓ max. Fülldruck mit automatischer Rückstellung nach 20 Minuten!
- ✓ Akustischer und optischer Alarm



Aufbau

Der neuartige Innenaufbau der Matratze (Patent angemeldet) erlaubt die Lagerung von Patienten bis 250 kg.



CPR-Ventil

„Im Falle des Falles“ ist eine Schnellentlüftung der Matratze mittels eines völlig neu entwickelten CPR-Ventils möglich.




Bauchlagerung

Durch einfaches Umlegen von zwei Ventilen werden die drei Kopfzellen rasch entleert.

## Weichlagerung


Druckmessung des Dt. Instituts für Pflegehilfsmittelforschung und -beratung, Göttingen

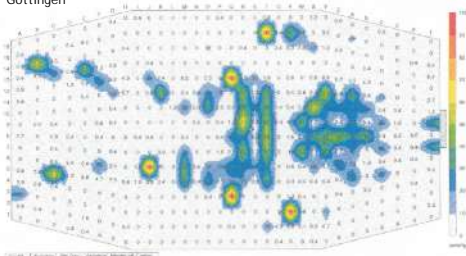

Optional Weichlagerung bis in den Wirkungsbereich von anerkannten LowAirloss-Systemen.

## Wechseldruck

Druckmessung des Dt. Instituts für Pflegehilfsmittelforschung und -beratung, Göttingen

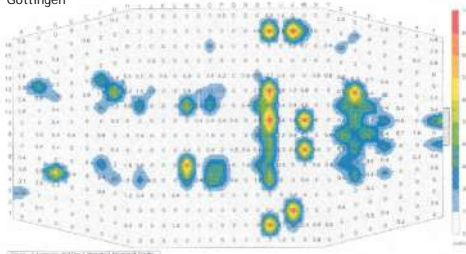

Vollständige Druckentlastung jeder Körperpartie im 10-Minuten-Zyklus für jeweils 2 Minuten.

## Anwenderkomfort



Neueste Techniken, mit Displayanzeige, sorgen für eine komfortable und sichere Anwendung. Per Knopfdruck ist die Betriebsart von dynamisch auf statisch mit einer jeweils individuellen Komforteinstellung fest, medium oder weich wechselbar. Maximale Füllung für pflegerische Maßnahmen. Automatische Matratzenleerung. Betriebsstundenzähler für Pflegedokumentation.

## Technische Daten:

### Steuereinheit:

Abmessungen (LxBxH)	48 x 22,5 x 13 cm
Gewicht	6,8 kg
Netzanschluss	230 Volt / 50 Hz
Schutzklasse II	
Schutzart B	
Stromaufnahme	50 Watt
Zyklusdauer	15 Minuten
Zykluskontrolle	Mikroprozessorgesteuerte
pneumatische Schalterbetätigung	
Geräuschpegel	ca. 30 dB (A)

### Matratze:

Abmessungen (LxBxH)	190 x 87 x 25 cm - Best.Nr.: NDS 250 120/S
Abmessungen (LxBxH)	210 x 87 x 25 cm - Best.Nr.: NDS 250 120/L
Gewicht	8,2 kg
Patientengewicht	bis max. 250 kg
Anzahl der Luftkammern	18 / 21



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH  
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf  
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien  
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at  
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 699 22 99 888



GerroMed GmbH Pflege- und Medizintechnik HandelsGes.m.b.H  
22547 Hamburg



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Druckhersteller: Sunmed GmbH/Eigendruck - Technische Änderungen vorbehalten  
© Sunmed 2024 / SM-NS-24V02