

SUNMED

Optima Juve

Spezial-Lagerungssystem für Kinder und Jugendliche



✓ Dekubitusprophylaxe und Therapie bis Grad 4

✓ Sanfter und umfassender Schutz durch vollautomatische Patientenanpassung

✓ KEINE Kontraindikationen

✓ Schmerztherapie

SUNMED *Optima Juve*

Spezial-Lagerungssystem für Kinder und Jugendliche

Das einzigartige, tunnelförmige Doppelzellensystem ermöglicht eine maximale Versorgung im Dekubitus- und Schmerzbereich.

Die durch einen Mikroprozessor überwachten Steuerzellen, erkennen das Patientengewicht, die Körpergröße, die momentane Liegeposition und passen den inneren Systemdruck kontinuierlich an.

Bekannte Nachteile herkömmlicher Lagerungssysteme bleiben aus, da das System nicht bewegt wird (= kein Wechseldruck).

Eine optische und akustische Alarmfunktion zeigt Systemstörungen, sowie eine eventuelle Überschreitung der Sitz- oder der maximalen Fülldruckzeit an.


Die CPR Auslösung erfolgt direkt am Aggregat.

Anwendungsbereiche


- ✓ Dekubitusprophylaxe und - Therapie
- ✓ Schmerzpatienten mit langen Liegezeiten
- ✓ Tumorpatienten
- ✓ Patienten mit instabilen Wirbelfrakturen
- ✓ Höchstisrikopatienten



Auflagedruck auf herkömmlicher Matratze

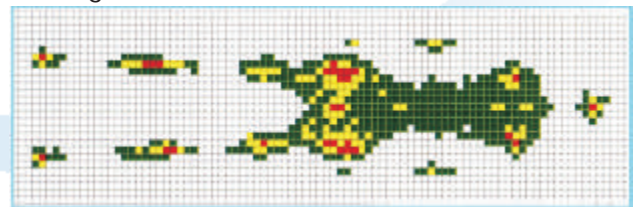

Auflagedruck auf der Optima Juve

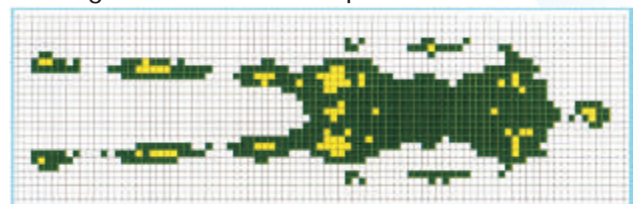

Technische Daten	Neo-Controller
Matratze	Optima Juve: 70 x 140 x 10 cm Optima Juve: 90 x 200 x 12 cm
Patientengewicht	7 bis 200 kg
Überzug	PU / Inkontinenz
Steuergerät	30 x 12 x 8 cm
Strom	220V 50Hz, max. 35W

Bezeichnung	Bestellnummer
Optima Juve 70x140x10	OJ0140
Optima Juve 90x200x12	OJ0200



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99 Fax: DW 1



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Technische Änderungen vorbehalten © Sunmed 2010 SM-OPJU-10V00