

PRODUKT DES MONATS

SUNMED

EOLE DC

- Aktive Auflage zur optimalen Lagerung
- Konstant niedriger Druck
- Wechseldrucktechnologie
- Tiefe Luftkammern



1 Tiefe Luftkammern

20 Kammern von je 20 cm mit modularem Design. Alle Kammern sind voneinander unabhängig und einzeln austauschbar.



2 Mit Sensoren

Das System reagiert und passt sich automatisch an Bewegungen und die Position des Patienten an. Pumpenfunktionen: Wechseldruck-/ Statische Weichlagerung, Komfortmodus und maximaler Druck, Druckausgleich in Sitzposition.



3 Bezug

In 4 Richtungen dehnbar (zur Optimierung des Einsinkens und zur Reduzierung von Scherkräften und Reibungen) sowie atmungsaktiv (luftdurchlässig und flüssigkeitsdicht).



4 Spezielles Fersenende

Das spezielle Fersenende lagert die empfindlichen Fersen besonders weich.


5 Transportmodus

Patient bleibt auch beim Transport luftgelagert.



6 Modulares Design

Einzelne, unabhängige, austauschbare Luftkammern.

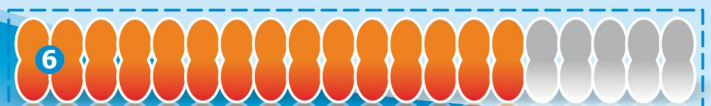

SUNMED

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf

Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: produktanfrage@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464

RUFEN SIE UNS AN - WIR BERATEN SIE GERNE!