

# PM 211

Luftstromtherapie auf  
höchstem Niveau!



## Matratzenauflage- system zur Behandlung von Dekubitus bis Stadium 4 nach EPUAP

- ➡ Mikroprozessorgesteuerte Steuereinheit
  - ➡ Verstellbare Zykluszeiten
  - ➡ Statikfunktion und maximaler Fülldruck
  - ➡ Variable Sitzzoneneinstellung
  - ➡ Unterdruck- und Stromausfallsalarm

# PM 211

Luftstromtherapie auf höchstem Niveau!


Das digital kontrollierte Wechseldrucksystem PM 211 wird als vollkommener Matratzensersatz eingesetzt. Sowohl eine wirksame Prophylaxe als auch eine hochwertige Dekubitustherapie bis Stadium 4 sind mit diesem modernen System gewährleistet. Durch die Matratzenhöhe von mehr als 25 cm kann der Körper optimal weichgelagert werden, der variable Wechseldruck ermöglicht eine zusätzliche Stimulation des Gewebes und fördert somit die Durchblutung. Die „air vented“ Kissen ermöglichen eine gleichmäßige Luftstromtherapie und tragen somit zusätzlich zur Wundheilung bei.

Die aktive Drucküberwachung der PM 211 garantiert die optimale Lagerung der Patienten während dem Betrieb. Zusätzlich gibt die optische und akustische Drucküberwachung dem Personal Sicherheit. Die umschaltbare Statikfunktion und der maximale Fülldruck erleichtern die Arbeit für das Personal.

Das maximale Patientengewicht ist mit 180 kg limitiert.



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH  
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf  
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien  
Internet: [www.sunmed.at](http://www.sunmed.at) - Email: [office@sunmed.at](mailto:office@sunmed.at)  
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464

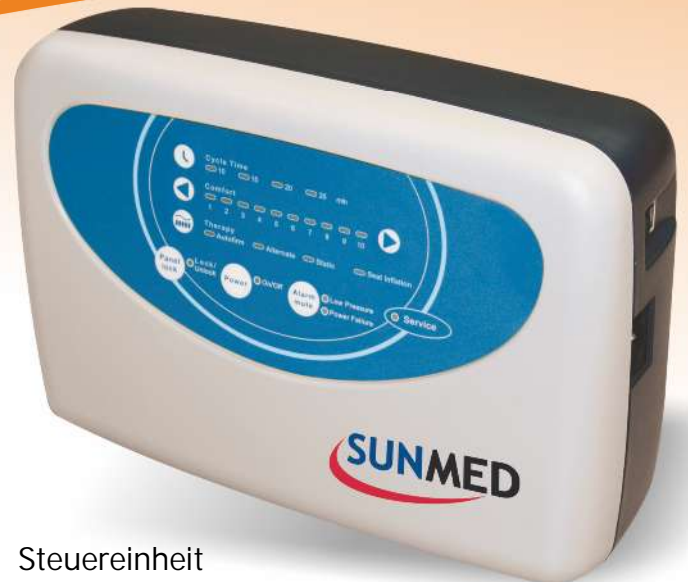

Steuereinheit



Luftkissen

Technische Daten	
Pumpe	Spezifikation
Stromversorgung	220-240 v, 50 Hz
Dimension (LxBxH)	29x20x11 cm
Gewicht	3,7 kg
Zykluszeit	10, 15, 20, 25 min steuerbar
Luftdurchfluss	8 L / min
Druckbereich	15-45 mmHg

Matratze	Spezifikation
Aufbau	20 Luftkammern
Überzug	Einweg-stretch PU, dunkelblau
Zellen	Nylon/PU, dunkelblau
Basis	Nylon/PVC, dunkelgrau
Dimension (LxBxH)	200x90x25,4 cm
Gewicht	10 kg

Bestellnummer: 9P052



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Technische Änderungen vorbehalten - © Sunmed 2015 / SM-PM211-15V01