

IsoAir™

Automatisch mit „ActiveSensor Technology“

Das Therapieunterstützungssystem IsoAir™ unterstützt die Vorbeugung und die Behandlung von Dekubiti (Druckgeschwüren) aller Kategorien/Stadien (einschließlich Stadium I, II, III, IV sowie Dekubiti, die nicht einem Stadium zuordenbar sind oder die Schädigung tiefer Gewebeschichten aufweisen). Dieses System ist für die Intensivpflege und Dauerbehandlung, einschließlich der häuslichen Pflege, geeignet.




Stoffes für ein ausgewogenes Mikroklima.

Der Bezug Equilibrium by Dartex® hält Feuchtigkeit von der Haut fern und verhindert ein Aufweichen.

Niedriger Wechseldruck
Mit dem Modus niedriger Wechseldruck verändern sich die Kontaktpunkte ständig, wobei der Patient eingesunken und von der Auflage umgeben bleibt. Pumpenfunktionen: Aktivsensortechnologie, manueller Betrieb, automatische Sicherheitsverriegelung, geringer Luftverlust, niedriger Wechseldruck, statischer Betrieb, verstellbarer Komfort, maximaler Druck, Alarmfunktionen.

Technologie mit tiefen Luftkammern
Dank der Technologie mit tiefen Luftkammern sinkt der Patient ein und wird von der Auflage umgeben. Alle Kammern sind voneinander unabhängig und austauschbar.

Die Seitenpolster tragen dazu bei, den Patienten im Therapiebereich zu halten, und senken gleichzeitig die Gefahr eines Verfangens oder Herausfallens.

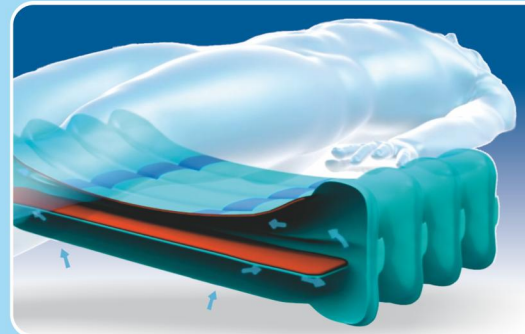

Geringer Luftverlust
Das offene Design erlaubt einen kontinuierlichen Luftstrom, um die Regelung des Mikroklimas zu unterstützen.

Aktivsensortechnologie (AST)
Die exklusive Aktivsensortechnologie optimiert automatisch den Systemdruck.



Der exklusive Bezug Equilibrium by Dartex® verteilt den Druck gleichmäßig und sorgt dank des hoch atmungsaktiven und dennoch strapazierfähigen



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464

RUFEN SIE UNS AN - WIR BERATEN SIE GERNE!