

Evakuierungstuch

Einfach, schnell und sicher im Evakuierungsfall



s-capepod
THE EVACUATION SOLUTION

Retten Sie das Leben von Patienten im Evakuierungsfall mit dem S-CAPEPOD®!

Stellen Sie sich vor: In Ihrer Abteilung bricht ein Brand aus, alle geraten in Panik, Sie müssen Leute evakuieren, ein bettlägeriger Patient ist auf Ihre Hilfe angewiesen ...

In einer Notsituation wie dieser ist schnelles und beherztes Handeln extrem wichtig. Damit Sie solch eine Situation bewältigen und den Patienten schnell in Sicherheit bringen können, haben wir das Evakuierungstuch S-CAPEPOD® entwickelt. Das S-CAPEPOD® wurde auf Anfrage eines Klinikums und gemäß dessen Anforderungen entwickelt. Vorausgegangen war die Erkenntnis, dass bei einer Evakuierungsübung mit Patienten in Betten die Gänge blockiert sind und der Zugang zu den Treppenhäusern erheblich erschwert ist.

Der Einsatz des S-CAPEPOD® ist aufgrund der innovativen Fertigung und der aufgedruckten Bildanleitung denkbar einfach: Das Evakuierungstuch liegt im Normalfall dauerhaft unter der Matratze. Mit zwei seitlichen Klappen und einer Klappe im Fußbereich lässt sich der Patient einhüllen, während er noch auf der Matratze liegt. So ist er innerhalb von 30 Sekunden bereit für eine Evakuierung. Jetzt können Sie ihn mit Leichtigkeit bewegen. Beim Ziehen des Patienten über Kanten und Stufen wirkt die normale Matratze als ideales Schutzpolster.

Zahlreiche Sicherheitsexperten haben sich bereits für das S-CAPEPOD® aufgrund der einfachen Handhabung und der Schnelligkeit entschieden, um die optimale Sicherheit ihrer Patienten zu gewährleisten. Mit dem S-CAPEPOD® steht Ihnen jederzeit ein einfach zu benutzendes Hilfsmittel zur Evakuierung von Patienten zur Verfügung.

Für die Evakuierung von schwereren Personen (bis 300kg) empfehlen wir Ihnen die Verwendung des "Bariatric S-CAPEPOD®".

Empfohlen für Personen bis maximal:	120-150 kg (Limit abhängig vom Körperrumfang)
Empfohlene Matratzenbreite:	80-90 cm
Gewicht/Masse:	1100 Gramm
Material:	Trevira CS polyester

Das S-CAPEPOD® wird bereits eingesetzt in folgenden Regionen:

- EU/Schweiz
- USA/Kanada
- Japan und in Ländern im Nahen Osten

Wer setzt das S-CAPEPOD® auch ein?



Gut zu wissen - sonstige Eigenschaften:


- Ausgestattet mit einer antimikrobiellen Funktion
- Flammhemmendes Material
- Starke Klettverschlüsse
- Wird permanent unter der Matratze platziert
- Waschbar

Die Sankt-Martinskliniek hat sich entschlossen, ihre 265 Betten mit dem S-CAPEPOD® auszustatten. Es gibt ähnlich aussehende Produkte auf dem Markt, aber nur das S-CAPEPOD® erfüllt alle Anforderungen.

Jorrit Bolhuis, Sankt-Martinskliniek, Nimwegen, Niederlande

Die Evakuierung mit dem S-CAPEPOD®-System geht dreimal schneller als ohne Evakuierungshilfe.

Daniel Fortin, Feuerwehrmann, Beauceville, Quebec, Kanada

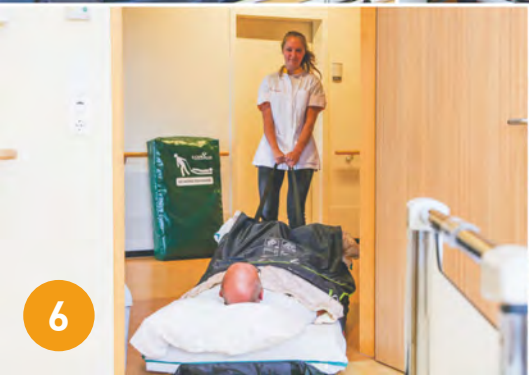



s-capepod
THE EVACUATION SOLUTION

'Zögern Sie nicht - nutzen Sie die
S-CAPEPOD® im Evakuierungsfall'



SUNMED

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Jochen-Rindt-Straße 25, 1230 Wien

Tel.: +43 (1) 699 22 99 Fax: +43 (1) 253 3033 2464
Email: office@sunmed.at, Internet: www.sunmed.at

HG: Wien, FN 169 774v, UID: ATU 44601301, DVR: 095 99 10
Druckhersteller: Online Druck GmbH/flyeralarm.at - Brown-Boveri-Straße 8, 2351 Wr. Neudorf

TGA Health Safety
Regulation

FDA CE
APPROVED

