

SMARTLINE *Hybrid*



- ➔ Kann mit und ohne Motor verwendet werden
- ➔ Bester Liegekomfort durch eine Einlage aus silikonisierten Hohlfasern
- ➔ Von der Prophylaxe bis Dekubitusgrad 4 einsetzbar

SMARTLINE Hybrid

Smartline Hybrid

Smartline Hybrid ist ein dynamisches Matratzen-Ersatzsystem kombiniert mit den Vorteilen moderner Schaumtechnologie. Das System wurde speziell für Patienten mit einem hohen Dekubitusrisiko entwickelt. Darüber hinaus ist es im dynamischen Modus hervorragend zur Therapieunterstützung geeignet. Dieses einzigartige System bietet ein hohes Maß an Patientenkomfort und kann, wenn klinisch erforderlich, in ein dynamisches Matratzensystem umgewandelt werden. Dafür wird das sensorgesteuerte digitale Steuergerät angeschlossen.




In den „U“-förmigen Rahmen aus hochwertigem Kaltschaum sind 14 luftgefüllte Polyurethan-Zellen eingebettet. Der Bezug, der mit Hochfrequenz verschweißten Nähten versehen ist, besteht aus atmungsaktivem Polyester-Gewebe mit Polyurethanbeschichtung. Kopf- und Fußteil bestehen aus einem hochwertigem RG70 Kaltschaum, um die punktuelle Druckbelastung gleichmäßiger zu verteilen und Dekubitus vorzubeugen. Zwischen dem Bezug und den Zellen befindet sich eine gesteppte Einlage aus silikonisierten Hohlfasern, um den Liegekomfort noch weiter zu erhöhen. Der Boden ist mit Transport-Haltegriffen und Evakuierungsschlaufen versehen.

Eine maximale Gewichtskapazität von bis zu 200 kg ermöglicht es dem Produkt, die Anforderungen schwererer Patienten zu erfüllen.



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 699 22 99 888

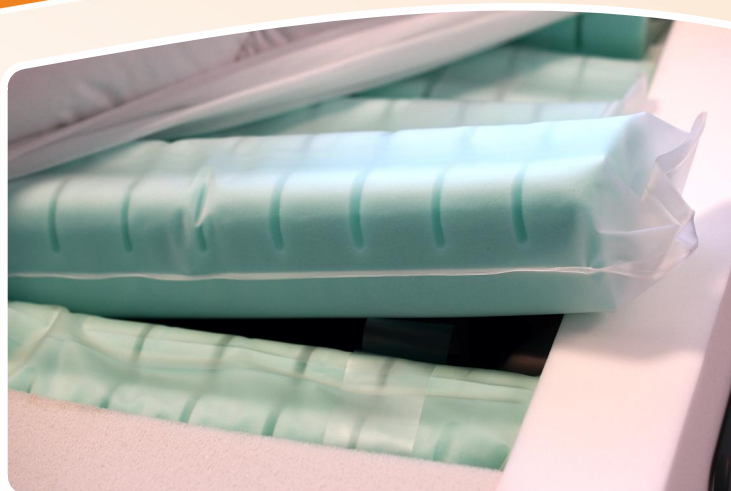

Alarm-
funktion



Wasserdicht PU
Bezug atmungsaktiv



Digitalbetrieb



Nahezu geräusch-
loser Betrieb



Optischer
Alarm



Statik-
Modus



Wechseldruck-Modus
1:2



Technische Daten

Steuergerät

Maße: ca. 28 x 16 x 10 cm

Gewicht: 1,7 kg

Luftleistung: 8,5 - 9 Liter / min

LED-Gewichtseinstellung

Spannungswerte: 230V / 50Hz

Druckbereich: 20 – 55mmHg, Drucksensor innen

Zykluszeit: 10 min

Unterdruckalarm (mit Stummschaltung), Netzausfallalarm,
Wechseldruck / Statikbetrieb, abnehmbares Netzkabel

Matratze

Maße: 200 x 90 x 16 cm

Gewicht: 18 kg

Feuerfester Schutzbezug

Transportfunktion mit Schnelkupplung

Material

Luft-Zellen: 14 PU Zellen

Kopf- und Fußteil: Kaltschaum RG 70

Bezug: bi-elastisch PU-beschichtet, atmungsaktiv,
rutschhemmend & wasserabweisend, feuerfest

Basis: Nylon / PVC



novacare

Bestellnummer.: **NC 996650**

Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Druckhersteller: Sunmed GmbH/Eigendruck - Technische Änderungen vorbehalten
© Sunmed 2024 / SM-SMHY-24V00